



Le traitement de votre patient vous dictera le choix entre un diffuseur **HOME PUMP ECLIPSE*** ou un diffuseur **HOME PUMP C-SERIES*** :

HOME PUMP ECLIPSE* SYSTEM est utilisé principalement pour les perfusions de courte durée (antibiotiques, par exemple). Selon le volume du diffuseur, la perfusion peut durer de 15 minutes à 5 heures.

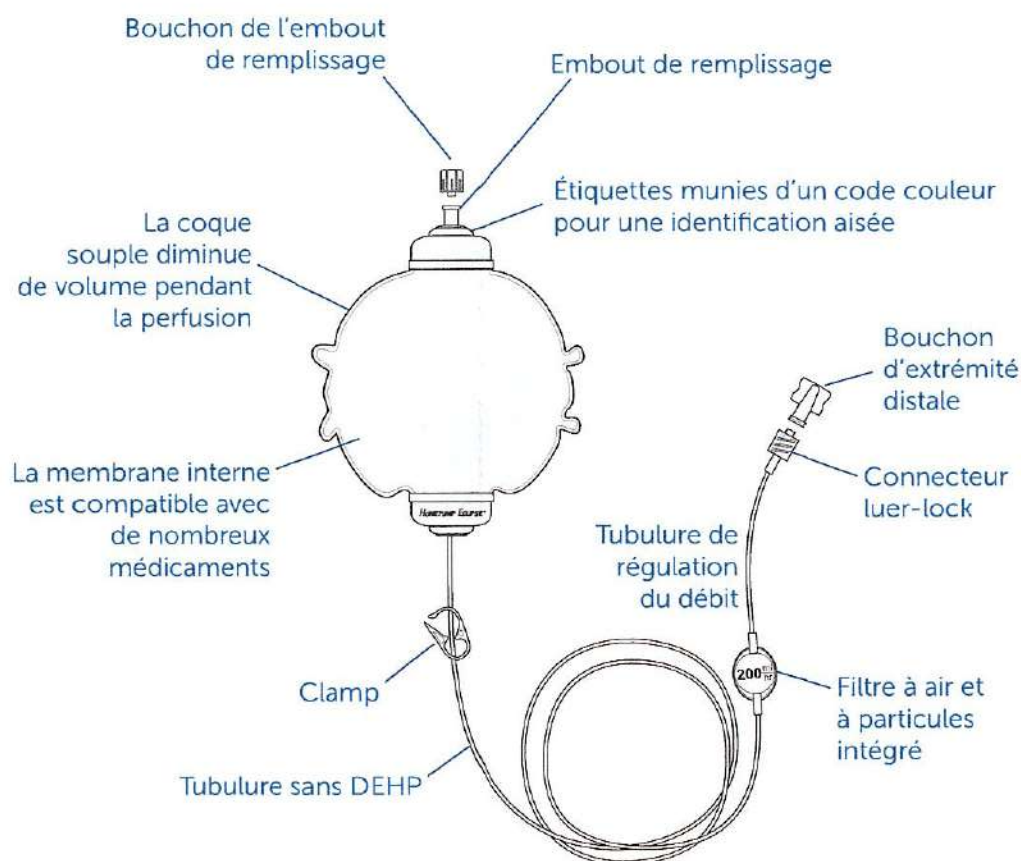

HOME PUMP C-SERIES* SYSTEM est utilisé pour l'administration de traitements, tels qu'une chimiothérapie, dont la perfusion peut durer de 1 à 12 jours.

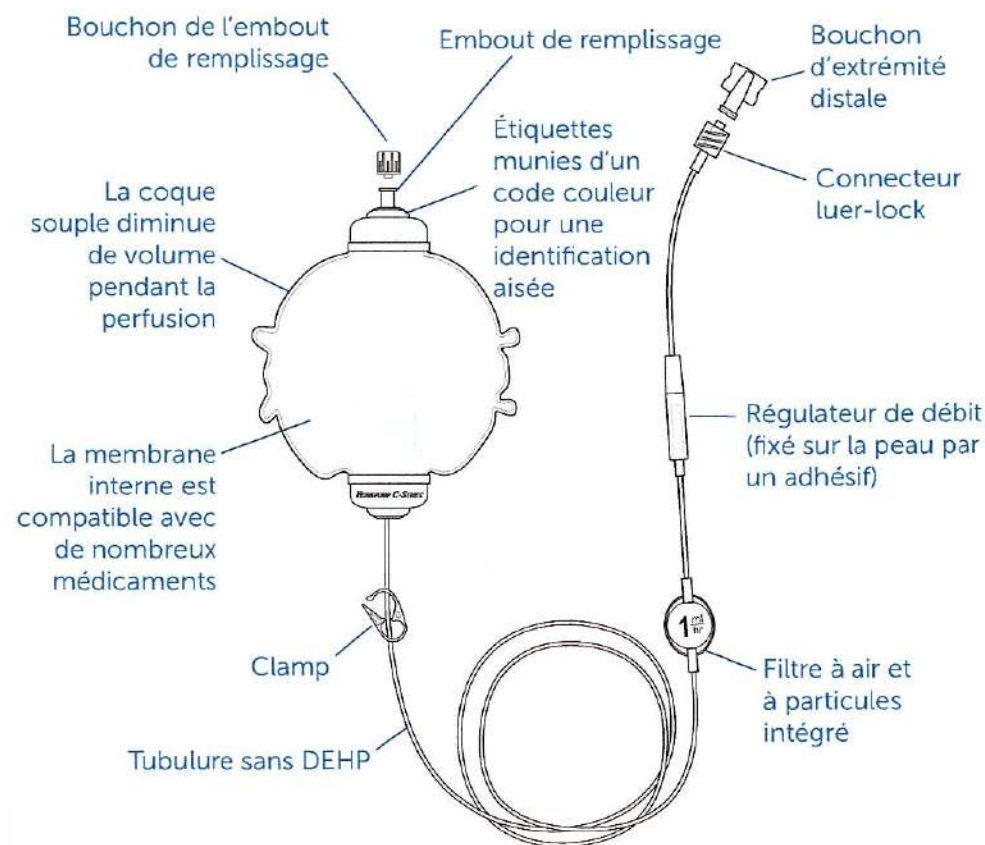

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE

Utilisez une technique aseptique


1. Enlevez le bouchon de l'embout de remplissage et mettez-le de côté.
2. Le diffuseur HOMEPUMP* peut être rempli à l'aide d'une seringue ou d'un accessoire similaire. Éliminez tout l'air du dispositif de remplissage et fixez-le fermement à l'embout de remplissage.
3. Fixez la seringue remplie à l'embout de remplissage et retournez le diffuseur, comme illustré. Saisissez fermement la seringue à deux mains et baissez le piston de manière régulière, jusqu'à ce que la totalité du volume ait été délivrée. N'appuyez pas sur le diffuseur pendant le remplissage, car la pointe de la seringue pourrait se briser. Si nécessaire, répétez cette opération afin d'obtenir le volume de remplissage souhaité.
4. Fermez le clamp qui se trouve sur la tubulure. Ne remplissez pas le diffuseur HOMEPUMP* au-delà du volume de remplissage maximal recommandé.
5. Retirez le dispositif de remplissage de l'embout de remplissage.
6. Remplacez le bouchon sur l'embout de remplissage et fixez-le fermement. Assurez-vous que le bouchon d'extrémité distale sur la tubulure est bien serré.
7. Notez les informations pharmaceutiques et les informations relatives au patient sur l'étiquette.

AMORÇAGE DE LA TUBULURE D'ADMINISTRATION

Utilisez une technique aseptique

1. Retirez le bouchon de l'extrémité distale de la tubulure.
2. Ouvrez le clamp de la tubulure. Le liquide commence à s'écouler et remplit la tubulure. Lorsque tout l'air a été expulsé de la tubulure, fermez le clamp de la tubulure et remplacez le bouchon d'extrémité distale.

REEMPLISSAGE/AMORÇAGE À L'AIDE DE MÉDICAMENTS SUJETS À LA PRÉCIPITATION

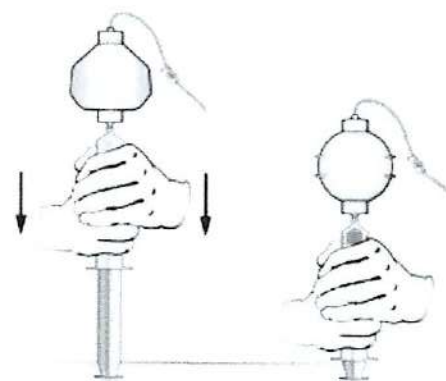

Certains médicaments, tels que le fluorouracile (5-FU), peuvent précipiter, ce qui provoque la cristallisation du médicament à l'intérieur de la tubulure du diffuseur, du filtre ou du régulateur de débit. La cristallisation du médicament peut provoquer une obstruction

qui réduit ou empêche la circulation du liquide. Afin de prévenir autant que possible la précipitation, respectez les recommandations de stockage et d'administration du fabricant. Pour diminuer le risque de précipitation dans la tubulure du diffuseur, le système HOMEPUMP* peut être